


Alpha Techno

Masážní
křeslo

AT-8312


Bránvod k použití

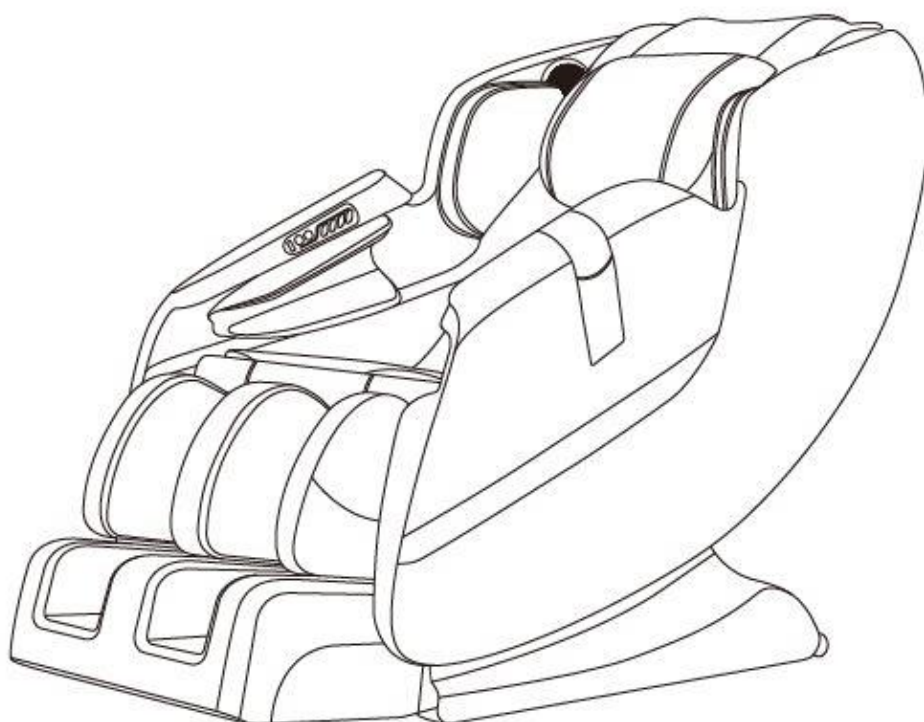

Bezpečnostní opatření


Při používání masážního křesla by se měla vždy dodržovat základní opatření pro snížení rizika úrazu elektrickým proudem, popálenin, ohně nebo zranění osob. Před používáním masážního křesla si prosím přečtěte následující bezpečnostní opatření.

- Pro omezení rizika zkratu a požáru se ujistěte, že je elektrická zástrčka bezpečně vložena do správné zásuvky.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Nepoužívat masážní křeslo v místech, kde je vysoká vlhkost jako je sauna nebo parní komora.
- Nepoužívat masážní křeslo venku a v místech s přímým slunečním světlem.
- Okamžitě po používání a před čištěním vždycky odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky.
- Pokud je elektřina vypnutá, přepnout vypínač do polohy OFF a odpojit masážní křeslo z elektrické zásuvky, aby se tak zabránilo jakémukoli poškození vašeho křesla, pokud by se zapnula znovu elektřina.
- Nikdy nepřipojovat/neodpojovat síťový kabel a zásuvku vlhkýma rukama.
- Při používání masážního křesla s dětmi, v blízkosti dětí nebo postižených osob je třeba důkladný a neustálý dohled.
- Masážní křeslo smí používat ve stejnou dobu pouze jedna osoba.
- Masážní křeslo je určeno k používání podle podmínek, uvedených v návodu.
Nepoužívat jiné než doporučené příslušenství.
- Pokud je napájecí kabel poškozen, musí být nahrazen speciálním kabelem nebo sadou, kterou poskytl výrobce nebo jeho servisní zástupce.
- Pro zabránění nehody, zranění nebo poškození křesla se NEPOKOUŠET stát nebo sedět na opěradle nebo opěrkách.
- Při používání masážního křesla se snažte zabránit usínání.
- Vždycky udržovat masážní křeslo čisté a nikdy nevkládat předměty do nebo okolo mezer v masážním křesle.
- NEPOHYBOVAT masážním křeslem taháním za napájecí kabel.
- Ujistěte se, že za masážním křeslem nebo pod ním nejsou děti, zvířata nebo jiné překážky.
- Pokud naleznete jakékoliv trhliny nebo díry v látce masážního křesla, kontaktujte naše servisní oddělení.
- Toto masážní křeslo je určeno pro použití v domácnosti a nemělo by se používat na jiné než domácí účely.
- Pokud máte pochybnosti o tom, zda byste měli nebo neměli používat toto masážní křeslo, porad'te se se svým lékařem.
- Prosím porad'te se s lékařem před používáním masážního křesla pokud jste těhotná, podstupujete lékařské ošetření, používáte lékařská elektronická zařízení jako je kardiostimulátor nebo zažíváte jakýkoliv z následujících problémů: maligní nádor, onemocnění srdce, bolesti zad, máte abnormální nebo zakřivenou páteř, osteoporózu nebo akutní onemocnění.
- Pokud při používání masážního křesla cítíte bolest, ihned ho přestaňte používat a porad'te se se svým lékařem.
- Nikdy nepoužívejte masážní funkci na oteklé nebo zanícené části těla.
- NEPOUŽÍVEJTE při jednorázovém používání masážní křeslo po dobu delší jak 30 minut.
- NEPOUŽÍVEJTE masážní křeslo pokud se používají aerosolové (sprej) výrobky nebo pokud se aplikuje kyslík.
- Toto masážní křeslo je neprofesionální výrobek, určený pro poskytování komfortní masáže a neměl by nahrazovat vhodné lékařské ošetření.

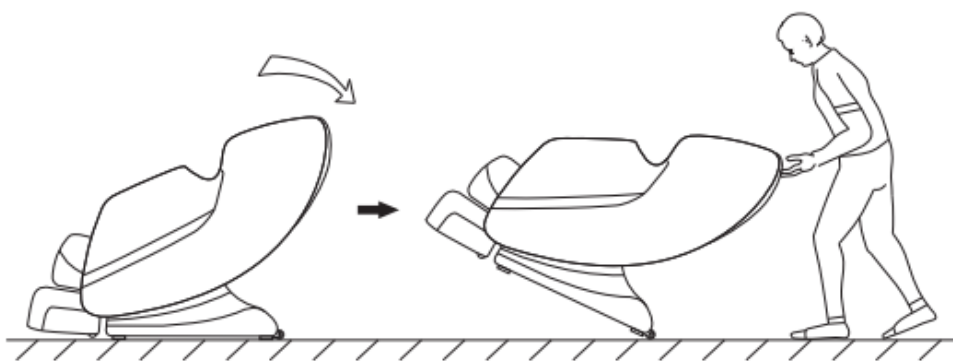

Umístění křesla



Ujistěte se, že je za i před masážním křeslem více než 50 cm volného prostoru, aby se opěradlo mohlo během provozu bez překážek sklopit.

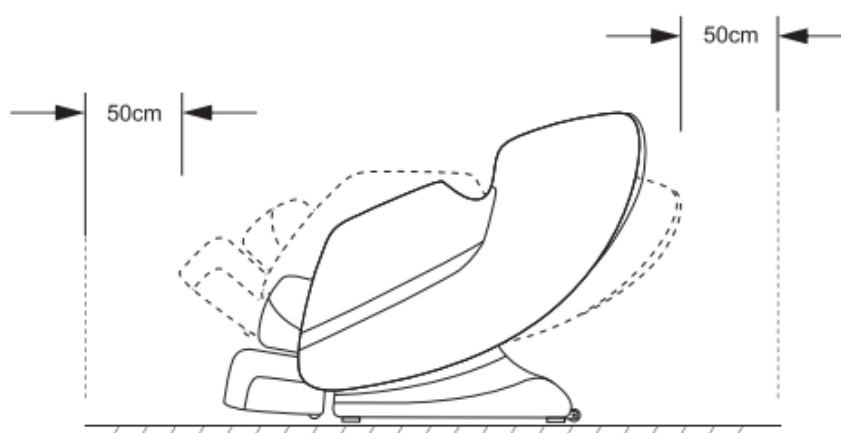



Instalace opěrky nohou

● Vložte vzduchovou trubici ① a stejnosměrný napájecí kabel ② do zdířek, jak je znázorněno na obrázku.


Po správném připojení překryjte nylonovým hadříkem upevněným kabelovými vázacími páskami.

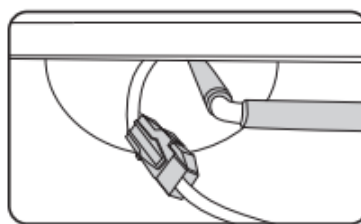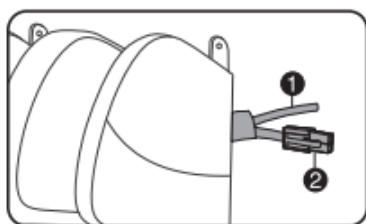

- Nasaďte štěrby (3) opěrky nohou do pevné části (4), jak je znázorněno na obrázku.

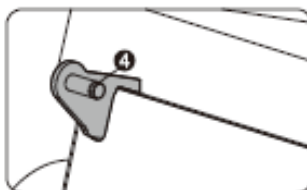
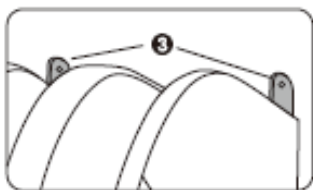


- Na každé straně vložte pojistnou sponu (5), jak je znázorněno na obrázku. Instalace je dokončena.

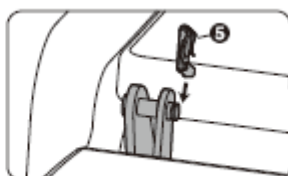

Instalace podložky pod opěradlo a polštáře

- Připevněte horní opěrku zad k opěradlu pomocí zipu.
- Polštář připevněte k opěradlu suchým zipem.

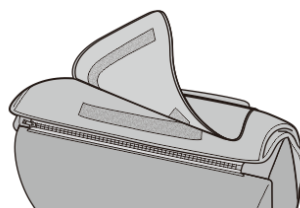
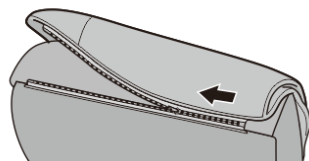


Připojení napájení

- Zapojte napájecí kabel k přívodnímu napájení a zapněte vypínač napájení.

Vypínač napájení

Přívodní napájení

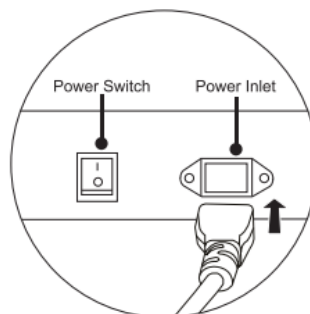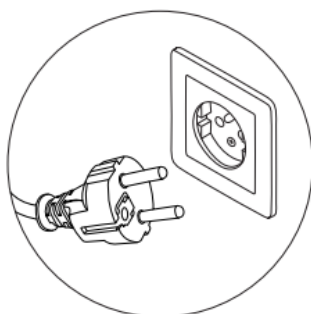

Součásti

Vnější struktura

Ramenní vzduchový vak

Ovladač vzduchových vaků

Vzduchový vak na paži

Vzduchový vak sedáku

Nožní vzduchový vak

Válečky



Polštář

Podložka opěrky zad

Opěrka ruky

Poduška

Noha

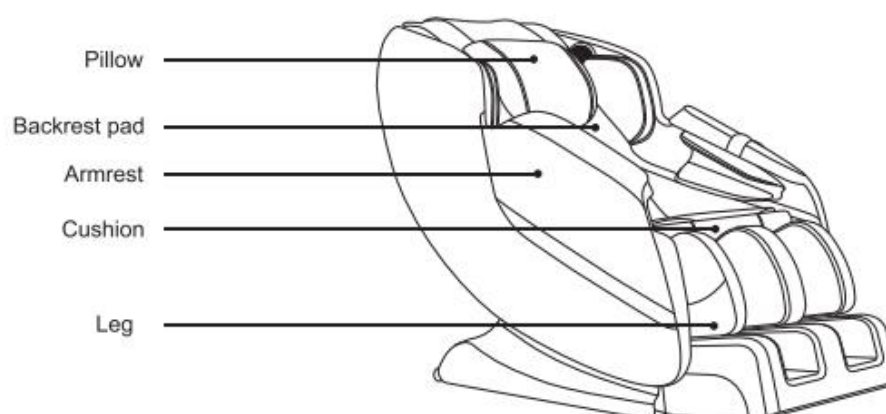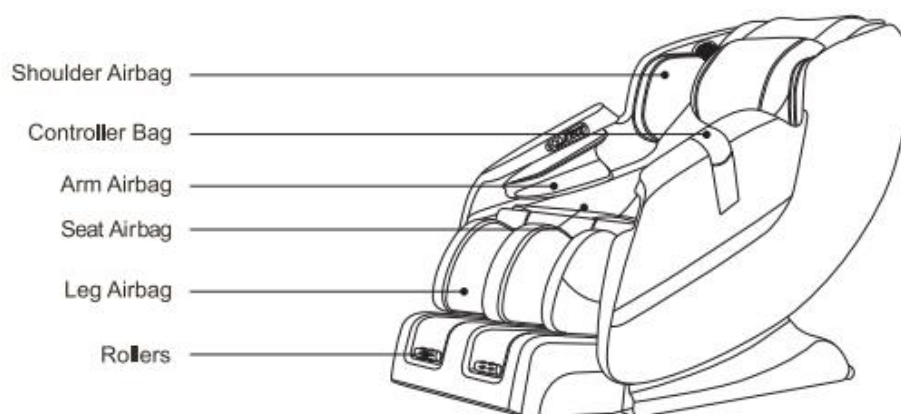

Ovladač

(Konkrétní podoba je závislá na skutečném produktu.)



Upozornění

- Nesedejte, nestoupejte ani nepokládejte na ovladač těžké předměty.
- Nenechte ovladač spadnout. Když ovladač nepoužíváte, doporučuje se ho umístit do boční kapsy na ovladač.
- Nepůsobte na ovladač nadměrnou silou.
- Nemanipulujte s ovladačem mokřýma rukama.
- Neovládejte ovladač ostrými hranami nebo tvrdými předměty. Mohlo by dojít k poškození.

Funkce ovladače

Funkce

Ikona

Popis

Zapnutí / Vypnutí



Při zapnutí napájení stisknutím tohoto tlačítka masážní křeslo zapnete a opětovným stisknutím ho vypnete.

Nula-G



Stisknutím tohoto tlačítka postupně zapnete, přepnete a vypnete funkci Nula-G.

Pozastavit



Stisknutím tohoto tlačítka pozastavíte všechny masážní funkce celého přístroje a opětovným stisknutím budete v masáži pokračovat.

Bluetooth



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete funkci

Ohřev



Jedním stisknutím tohoto tlačítka zapnete funkci ohřevu a na obrazovce se zobrazí ikona „“. Opětovným stisknutím funkci ohřevu vypnete a ikona zhasne.



Intenzita+ / Intenzita-



Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte intenzitu masáže.

Stisknutím tohoto tlačítka snížíte intenzitu masáže.



Záda nahoře / Záda dole



Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte horní část opěradla zad a uvolněním tlačítka uzamknete aktuální úhel opěradla zad.

Dlouhým stisknutím tohoto tlačítka nastavíte spodní část opěradla zad a uvolněním tlačítka uzamknete aktuální úhel opěradla zad.

Válečky

Stisknutím tohoto tlačítka zapnete / vypnete funkci masáže s využitím válečků a přepnete intenzitu válečků.



Krk a ramena



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete / vypnete masážní válečky v oblasti ramen a krku.

V režimu pro horní část krku a ramen stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi otáčením válečků ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.



Načasování

Stisknutím tohoto tlačítka nastavíte dobu masáže.

Zvolená doba je 15/20/25/30 minut.



Pas a záda



Stisknutím tohoto tlačítka zapnete / vypnete masážní válečky v oblasti pasu a zad.

V režimu pro horní část krku a ramen stiskněte toto tlačítko pro přepínání mezi otáčením válečků ve směru hodinových ručiček a proti směru hodinových ručiček.



Vzducho

Stisknutím tlačítka zapnete nebo vypnete funkci vzduchových vaků v oblasti ramen, paží, kyčlí, lýtek a chodidel.



Intenzita vzduchového vaku



Stisknutím tohoto tlačítka zvýšíte intenzitu vzduchového vaku.

Stisknutím tohoto tlačítka snížíte intenzitu vzduchového vaku.

Automatický režim

Funkce	Popis
Osvěžení	Hlavní režim, masáž celého těla, intenzita masáže s využitím válečků a vzduchových vaků je silnější.
Relax	Relaxační režim, masáž celého těla, střední intenzita pro masáž s využitím válečků a vzduchových vaků.

Jóga

Stisknutím tohoto tlačítka primárně protáhnete své tělo pohybem a tlakem vzduchu.

Krk a ramena

Částečná masáž zaměřená na úlevu od bolesti krku a namožených ramenních svalů, váleček se více zaměřuje na masáž krku a ramen.

Pas a záda

Částečná masáž, zaměřená na masáž pasu a zad pro úlevu od bolesti zad, váleček se více zaměřuje na masáž pasu.

Sen

Masáž celého těla, lehká intenzita válečku.

Párování prostřednictvím Bluetooth

V seznamu Bluetooth v telefonu vyberte párování s modelem AT-8312. Když uslyšíte zvuk „du“, je spojení dokončeno.

Tlačítka klávesových zkratk v loketní opěrce

Funkce Ikona Popis

Zapnutí/Vypnutí  Stisknutím tohoto tlačítka zařízení zapnete/vypnete

Pozastavit/Spustit  Stisknutím tohoto tlačítka zařízení pozastavíte/spustíte.

Automatický režim  Stisknutím tohoto tlačítka můžete přepínat mezi několika automatickými režimy. Podle své fyzické kondice zvolte automatický režim pro cílenou masáž

.NULA-G  Stisknutím tohoto tlačítka přepnete na režim nulové gravitace.

Vzduchový vak  Stisknutím tohoto tlačítka zapnete/vypnete funkci vzduchového vaku.

Válečky  Stisknutím tohoto tlačítka zapnete nebo vypnete masážní funkci využívající válečky.

Čištění a údržba

1. Skladování masážního křesla

- Suchým, měkkým a čistým hadříkem po použití.
- Udržujte masážní křeslo čisté a mimo místa s vysokou vlhkostí.
- Pokud masáž nebudete delší dobu používat, zakryjte masážní křeslo přehozem proti prachu a odpojte zástrčku od elektrické zásuvky.

Upozornění.

- Neskladujte masážní křeslo na přímém slunci nebo na místech s vysokou teplotou. Mohlo by to způsobit vyblednutí barvy čalounění.
- Nedovolte, aby masážní křeslo zůstalo po delší dobu v kontaktu s vinylem nebo tapetami, protože by to mohlo vést ke změně barvy.

2. Čištění masážního křesla

- Před čištěním se ujistěte, že je hlavní vypínač vypnutý a že je síťová zástrčka odpojena od elektrické zásuvky.
- Po každém použití otřete prach a nečistoty zanechané po masáži suchým, měkkým a čistým hadříkem.
- Tento výrobek lze důkladně vyčistit mírně navlhčeným hadříkem.
- Čalounění nežehlete.
- Čalounění neperte v domácí pračce, protože by to mohlo vést ke zhoršení kvality čalounění.

Upozornění

- Na masážní křeslo nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, jako je benzen nebo ředidlo. Mohlo by to způsobit vyblednutí čalounění.

3. Čištění ovladače.

- K čištění ovladače používejte pouze čistý, suchý hadřík.

Upozornění.

- K čištění ovladače nepoužívejte mokré hadřík, protože by mohlo dojít k poruše.

Poradce při potížích

Pokud po následujících kontrolách přetrvává abnormální chování, přestaňte masážní křeslo okamžitě používat, abyste předešli případné nehodě. Odpojte napájecí kabel ze zásuvky a kontaktujte prodejce nebo nejbližší zákaznické centrum.

Situace		Řešení
Masážní křeslo nefunguje, i když je připojeno k napájení.		· Zkontrolujte, zda je zástrčka dobře připojena a zda dobře funguje. · Zkontrolujte, zda je spínač masážního křesla otočen do polohy „I“.
Během provozu funguje ovladač, ale masážní křeslo ne.		· Masážní křeslo může být po delším používání přehřáté. Automaticky se ochladí, aby se obnovil jeho normální stav. · VYPNĚTE napájení a nechte křeslo vychladnout po dobu 30 až 50 minut.
Během provozu ovladač ani masážní křeslo nefungují		· Pokud uplyne čas nastavený v časovači, znovu stiskněte funkci časovače, abyste mohli pokračovat v provozu. · Křeslo aktivujete VYPNUTÍM napájení a opětovným ZAPNUTÍM spínače.

Specifikace

Model: AT-8312

Jmenovité napětí: 100–240 V~

Jmenovitá frekvence: 50–60 Hz

Jmenovitý výkon: 90 W

Rozměry složeného produktu: 1 354 (D) × 735 (Š) × 1 030 (V) mm

Rozměry rozloženého produktu: 1 644 (D) × 735 (Š) × 812 (H) mm

