

Massage Pistole MP 10

Bedienungsanleitung

DE



ORIGINALBEDIENUNGSANLEITUNG

Inhalt

Technische Daten	2
Einleitung.....	3
Zeichenerklärung	3
Bestimmungsmäßiger Gebrauch.....	4
Wichtige Sicherheitshinweise.....	5
Übersicht.....	7
Inbetriebnahme.....	8
Akkuhandhabung.....	11
Aufbewahrung, Wartung und Reinigung.....	14
Garantie.....	15
Hinweise zur Entsorgung.....	18
Konformitätserklärung / Zertifikate.....	18
Notizen.....	19

Technische Daten

Akku:	12 V / 1500 mAh Li-Ion
Ladedauer:	ca. 2 - 3 Stunden
Maße:	ca. 17 x 6,5 x 22 cm
Gewicht:	ca. 1,6 kg

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf der Massage Pistole MP 10!

Bitte lesen Sie diese Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie die Massage Pistole in Betrieb nehmen und vergewissern Sie sich, dass sie ordnungsgemäß und den Anweisungen entsprechend verwendet wird. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Verwendung auf. Geben Sie die Massage Pistole nur mit der Bedienungsanleitung an Dritte weiter.

Der Hersteller behält sich Änderungen des Produktes vor. Die Bedienungsanleitung und Abbildungen darin können je nach Modell abweichen.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit der Massage Pistole MP 10!

Zeichenerklärung



WARNUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Verletzungen zu vermeiden.



ACHTUNG!



Enthält wichtige Informationen, um Schäden am Produkt zu vermeiden.



HINWEIS!



Macht Sie beim Lesen der Bedienungsanleitung auf wichtige Informationen und Hinweise aufmerksam.

Bestimmungsmäßiger Gebrauch

Die Massage Pistole MP 10 ist ausschließlich zum Massieren für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Betrieb geeignet.

Die Massage Pistole MP 10 eignet sich nicht für therapeutische bzw. medizinische Zwecke.

Die Massage Pistole MP 10 darf nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben verwendet werden.

Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen.

Die Massage Pistole MP 10 ist kein Spielzeug für Kinder.

Der Hersteller oder Inverkehrbringer übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Bitte halten Sie sich strikt an die in der Anleitung angeführten Sicherheitsbestimmungen. Der Produzent oder Inverkehrbringer kann nicht verantwortlich gemacht werden für jegliche Art von Vermögens-, Personen- oder Sachschäden, Unfälle und Rechtsstreitigkeiten, die durch die Verletzung der Sicherheitsbestimmungen verursacht worden sind. Die Haftung ist stets auf den Anschaffungswert der Massage Pistole beschränkt.
- Konsultieren Sie vor der Verwendung der Massage Pistole Ihren Arzt. Beraten Sie sich hinsichtlich geeigneter Anwendungen, optimaler Häufigkeit und Intensität. Besondere Beeinträchtigungen (z.B. orthopädische Beschwerden) müssen vor der Verwendung mit dem Arzt abgestimmt sein.
- Überprüfen Sie die Massage Pistole vor jeder Inbetriebnahme auf einwandfreien Zustand.
- Bei sichtbarer Beschädigung, beschädigtem Netzkabel oder Stecker darf die Massage Pistole nicht benutzt werden.
- Es ist untersagt, die Massage Pistole zu modifizieren.
- Öffnen Sie das Gehäuse der Massage Pistole nicht, die Reparatur darf nur durch eine von KSR autorisierte Fachwerkstatt erfolgen. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen, unsachgemäßem Anschluss oder falscher Bedienung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.
- Verwenden Sie die Massage Pistole niemals im Freien, in feuchten Räumen oder Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit.
- Sorgen Sie dafür, dass die Massage Pistole nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.

Wichtige Sicherheitshinweise



WARNUNG!



- Halten Sie die Massage Pistole von Flammen, direkter Sonneneinstrahlung und heißen Oberflächen fern.
- Lassen Sie die Massage Pistole während des Betriebs nie unbeaufsichtigt.
- Stecken Sie keine Finger, andere Körperteile oder Gegenstände in die Öffnungen der Massage Pistole.
- Halten Sie lange Haare von der Massage Pistole fern, sie könnten sich am Massageaufsatz verfangen.
- Die Massage Pistole kann von Kindern ab 8 Jahren benutzt werden. Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mangelnder Erfahrung können die Massage Pistole unter Aufsicht benutzen oder nachdem sie in Bezug auf die sichere Verwendung unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.
- Kinder dürfen nicht mit der Massage Pistole spielen.
- Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden.
- Halten Sie Kinder unter 8 Jahren und Tiere von der Massage Pistole fern.
- Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen. Kinder können sich darin verfangen und beim Spielen erstickten.
- Verursacht das Benutzen der Massage Pistole Schmerzen, beenden Sie die Anwendung und konsultieren Sie einen Arzt.

Übersicht



- 1** Gehäuse
- 2** Hauptschalter
- 3** Anschlussbuchse
- 4** Ladestandanzeige
- 5** Geschwindigkeits-Stufe
- 6** Erhöhen- / Verringern-Taste

Inbetriebnahme

- Schieben Sie den Hauptschalter in die Position "ON".
- Die Ladestandanzeige zeigt den prozentuellen Ladestand des Akkus.
- Wählen Sie den für Ihre beabsichtigte Anwendung passenden Massageaufsatz:



1. Großer Kugelkopf:
Für die Ganzkörpermassage / große Muskelgruppen
2. Kleiner Kugelkopf:
Für kleine Muskelgruppen
3. Keilkopf:
Für kleine Muskelflächen
4. Gabelkopf:
Für mittelgroße Muskelgruppen
5. Kegelkopf:
Punktgenaue Behandlung von Triggerpunkten und Muskeln
6. Flachkopf:
Für große Muskelgruppen

Inbetriebnahme

- Massagekopf einsetzen / entnehmen:
 1. Setzen Sie den Massagekopf ein und drehen ihn 360° im Uhrzeigersinn, um ihn zu verriegeln.



2. Um den Massagekopf zu entnehmen, drehen Sie ihn zum Entriegeln 360° gegen den Uhrzeigersinn und ziehen ihn dann heraus.
- Drücken Sie die Taste \oplus , um die Massage Pistole zu aktivieren, am Display wird die aktuelle Geschwindigkeitsstufe angezeigt.
 - Wählen Sie die gewünschte Geschwindigkeitsstufe mit der Taste \oplus oder \ominus . Es stehen 20 Stufen zur Verfügung. Auf Stufe 1 ist die Geschwindigkeit 1.200 U/Min, mit jeder Stufe erhöht sie sich um 100 U/Min. Auf Stufe 20 ist die Geschwindigkeit 3.200 U/Min.
 - Drücken Sie die Taste \oplus oder \ominus für etwa 5 Sekunden, um den Massagevorgang zu beenden.
 - Schieben Sie nach Beendigung der Massage den Hauptschalter in die Position "OFF", um die Massage Pistole aus zu schalten.

Inbetriebnahme



HINWEIS!



Zum Schutz deaktiviert sich die Massage Pistole automatisch:

- nach 10 Minuten Betriebsdauer
- wenn der ausgeübde Druck zu stark ist

Wurde die Massage Pistole automatisch deaktiviert, drücken Sie die Taste , um sie erneut zu aktivieren.



WARNUNG!



- Üben Sie mit der Massage Pistole immer nur leichten Druck auf den Massagebereich aus.
- Massieren Sie keinen Punkt länger als 1 Minute.
- Verwenden Sie keine hohen Geschwindigkeitsstufen und / oder hohen Druck um sensible Bereiche, den Kopf oder Knochen/-teile zu massieren.
- Wiederholte Anwendung mit zu hoher Geschwindigkeit und / oder zu hohem Druck kann Schürfwunden verursachen.
- Bei Schmerzen beenden Sie die Anwendung sofort.

Akkuhandhabung

Die Ladestandanzeige gibt mit der Zahl 99 an, dass der Akku vollständig geladen ist. Während des Betriebs sinkt die angezeigte Zahl entsprechend des Ladestands auf 80, 60, 40 und zuletzt auf 20. Wird nur noch 20 angezeigt, muss der Akku umgehend geladen werden:

1. Vergewissern Sie sich, dass die Ladebuchse und das Ladegerät trocken sind.
2. Stellen Sie sicher, dass die Massage Pistole ausgeschaltet ist (Hauptschalter in der Position "OFF").
3. Verbinden Sie das Ladekabel mit der Ladebuchse.
4. Verbinden Sie den Netzstecker des Ladegeräts mit einer geeigneten Wandsteckdose (220 - 240 V / 50 - 60 Hz).
5. Die LED auf dem Ladegerät leuchtet beim Laden Rot.
6. Wechselt LED auf Grün, ist der der Akku vollständig aufgeladen. In diesem Fall sollte das Laden beendet werden.
7. Trennen Sie das Ladegerät vom Stromnetz und von der Massage Pistole.



WARNUNG!



- Den Akku niemals aus der Massage Pistole entnehmen
- Laden Sie den Akku alle 2 Monate mindestens 1 Stunde, auch wenn die Massage Pistole nicht in Verwendung war, sonst verliert er an Kapazität.
- Regelmäßiges Laden bewahrt den Akku vor Tiefentladung.
- Den Akku niemals erhitzen oder ins offene Feuer werfen.
- Akkuzellen niemals über den Hausmüll entsorgen.
- Akkukontakte niemals mit Nässe in Berührung bringen.

Akkuhandhabung



WARNUNG!



- Die optimale Betriebstemperatur des Akkus liegt zwischen 10°C und 30°C. Darüber und auch darunter verschlechtert sich die Leistungsabgabe, dies führt zu einer reduzierten Betriebsdauer.
- Die Massage Pistole darf nur mit dem mitgelieferten Ladegerät geladen werden. Achten Sie auf die korrekte Spannungsversorgung (220 - 240 V / 50 - 60 Hz).
- Bei Beschädigungen am Ladekabel darf die Massage Pistole nicht geladen werden. Wenden Sie sich bitte an den Kundendienst.
- Die Lebensdauer und Leistung eines Akkus sind abhängig von seinem Alter, der Pflege und wie oft dieser in Verwendung war.
- Für eine optimale Akkulebensdauer laden und lagern Sie die Massage Pistole in einem trockenen und sauberen Umfeld, am besten bei 7-15°C Raumtemperatur.
- Die Ladezeit der Massage Pistole beträgt bis zu 4 Stunden. Bleibt das Ladegerät dauerhaft mit dem Akku und dem Stromnetz verbunden, wirkt sich das negativ auf die Akkulebensdauer aus.
- Während des Ladevorgangs dürfen die Massage Pistole und das Ladegerät nicht abgedeckt werden.
- Schalten Sie die Massage Pistole während dem Laden niemals ein.

Akkuhandhabung



WARNUNG!



- Lithium Akkus haben je nach Ladezustand einen Gefrierpunkt von ca. -20°C bis -25°C . Gefriert eine Akkuzelle ist diese unwiederbringlich zerstört und der ganze Akku muss getauscht werden. Wie auch bei konventionellen Akkus verliert ein Lithium Akku bei niedrigen Temperaturen an Kapazität.
- Im Vergleich zu anderen Akkumodellen haben Lithium Ionen Akkus eine sehr geringe Selbstentladung und einen sehr geringen Memory Effekt, jedoch müssen diese periodisch geladen werden.
- Bitte beachten Sie, dass ein tief entladener Akku irreparabel zerstört ist und kostenpflichtig ausgetauscht werden muss. Deswegen sollte der Akku auch im Betrieb niemals vollständig entladen werden.

Aufbewahrung, Wartung und Reinigung

Nach der Benutzung

- Schalten Sie den Hauptschalter nach der Verwendung in die Position "OFF", um die Massage Pistole aus zu schalten.
- Wird die Massage Pistole über einen längeren Zeitraum nicht benutzt, bewahren Sie sie nach erfolgter Reinigung in der Originalverpackung an einem trockenen, warmen Ort außerhalb der Reichweite von Kindern auf.

Reinigung

- Vergewissern Sie sich vor der Reinigung, dass die Massage Pistole ausgeschaltet (Hauptschalter in Position "OFF") und vollständig abgekühlt ist.
- Wischen Sie das Gehäuse der Massage Pistole mit einem leicht angefeuchteten, fusselfreien Tuch ab.
- Lassen Sie die Massage Pistole vor der weiteren Verwendung oder Aufbewahrung vollständig trocknen.



ACHTUNG!



- Sorgen Sie dafür, dass die Massage Pistole nicht mit Flüssigkeiten in Berührung kommt.
- Verwenden Sie keine sauren oder scheuernden Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie keine Drahtbürste, Stahlwolle oder andere abrasive Gegenstände.

Garantie

Vor der Inbetriebnahme lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung gründlich durch, um sich mit dem Umgang der Massage Pistole vertraut zu machen.

Die KSR Group GmbH gewährt eine gesonderte Garantie unter Einhaltung der nachstehenden Bedingungen. Die gesetzlichen Gewährleistungsvorschriften sowie die sich aus dem Produkthaftungsgesetz ergebenden Ansprüche bleiben hiervon unberührt. Eventuelle Ansprüche des Käufers auf Nacherfüllung und Schadensersatz bei Mängeln bleiben bei Vorliegen der entsprechenden Voraussetzungen daneben erhalten.

Die Garantie gilt für die Massage Pistole MP 10 und beträgt ab dem Kaufdatum (es gilt das Belegdatum) 12 Monate.

Die Garantie umfasst Material, Konstruktions- und Fertigungsfehler, vorausgesetzt, dass dieser Mangel bereits bei Lieferung vorhanden war und das Produkt vom Käufer sach- und bestimmungsgemäß behandelt wurde. Verschleißteile sowie Materialien, welche für Servicearbeiten verwendet werden, sind von der Garantie ausgeschlossen. Die Garantie beinhaltet entweder die kostenlose Reparatur, den Austausch des defekten Teils bzw. der defekten Teile oder den Austausch des gesamten Produkts gegen ein gleichwertiges Produkt. Das entsprechende Wahlrecht obliegt der KSR Group GmbH.

Garantie

Bei Auftreten eines Störfalles/Mangels ist umgehend der Händler zu informieren und diesem ist das aufgetretene Problem ausführlich zu schildern. Kann das Problem auf diesem Wege nicht gelöst werden, ist das gründlich gereinigte Produkt inklusive aller Zubehörteile transportsicher zu verpacken und den Anweisungen des Händlers entsprechend zu retournieren.

Dem Paket sind die nachfolgenden Informationen und Dokumente beizufügen:

1. Name, Vorname und Adresse (zusätzlich auch außen auf dem Paket anzugeben)
2. Modell-Nr. und Serien-Nr. (falls vorhanden)
3. Kaufdatum
4. Original des Kaufbeleges
5. Aussagekräftige Fehlerbeschreibung
6. Im Falle einer Beschädigung durch den Transport:
Name des Paketdienstes und Paketnummer

Es wird ausdrücklich empfohlen, den Originalkarton für die transportsichere Verpackung zu verwenden. Sollten Sie eine andere Verpackung verwenden, ist dafür zu sorgen, dass diese fachgerecht gegen die typischen Gefahren eines Versandes schützt und entsprechende Schutzvorrichtungen aufweist. Eine bloße Pappverpackung mit Papierpolsterung ist nicht ausreichend. Für Schäden, die durch unsachgemäße Verpackung entstehen, wird von KSR Group GmbH keine Haftung übernommen und die Garantie entfällt.


Garantie

Der Garantieanspruch entfällt in folgenden Fällen:

- Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung
- bei unsachgemäßer Bedienung, Pflege und / oder Wartung oder Lagerung (z.B. Schäden durch Feuchtigkeit oder zu hohe Temperaturen, verwehrte Produkte, etc.)
- bei Reparaturen, Reparaturversuchen und Modifikationen jeglicher Art sowie bei Einsatz von fremden Ersatz- und Zubehöerteilen usw., die von jemand anderem als von KSR Group GmbH oder von ihr autorisierten Betrieben vorgenommen wurden
- bei unsachgemäßer Transportverpackung und / oder unsachgemäßem Transport
- bei unsachgemäßen mechanischen Einwirkungen auf das Produkt oder auf Teile des Produkts
- bei sämtlichen Ereignissen, die nicht in der Verarbeitung und Herstellung des Produkts begründet sind (z.B. Sturz, Aufprall, Beschädigung durch Fremdeinwirkung, Brand, Erdbeben, Überschwemmungsschäden, Blitzschlag etc.)
- sofern kein originaler Kaufbeleg vorgelegt wird
- bei Nutzung außerhalb privater Zwecke, insbesondere bei gewerblicher Nutzung

Entstehen der KSR Group GmbH Kosten durch Rückgabe / Rücksendung eines Produktes, obwohl weder ein Gewährleistungsfall noch ein Recht zur Rückgabe vorliegt, sind diese vom Käufer zu tragen.

Hinweise zur Entsorgung

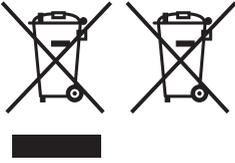

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll! Sollte die Massage Pistole einmal nicht mehr benutzt werden, so ist jeder Verbraucher gesetzlich verpflichtet, Altgeräte getrennt vom Hausmüll, z. B. bei einer Sammelstelle seiner Gemeinde / seines Stadtteils, abzugeben. Damit wird gewährleistet, dass Altgeräte fachgerecht verwertet und negative Auswirkungen auf die Umwelt vermieden werden. Deswegen sind Elektrogeräte mit diesem Symbol versehen.

Defekte oder nicht mehr zu verwendende Akkus bringen Sie bitte zu Ihrer ortsansässigen Sammelstelle. Achten Sie auf das Symbol auf dem Akku.



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Konformitätserklärung / Zertifikate



Dieses Produkt entspricht den europäischen Richtlinien.

Inverkehrbringer:
KSR Group GmbH
Im Wirtschaftspark 15
3494 Gedersdorf
Österreich