



GIO mumLine Handy


Elektrische Doppelmilchpumpe mit Schalen

BEDIENUNGSANLEITUNG

Bevor Sie die Milchpumpe benutzen, lesen Sie diese Bedienungsanleitung durch und bewahren Sie sie zum Nachschlagen auf.

Diagramm der Produktgestaltung

01

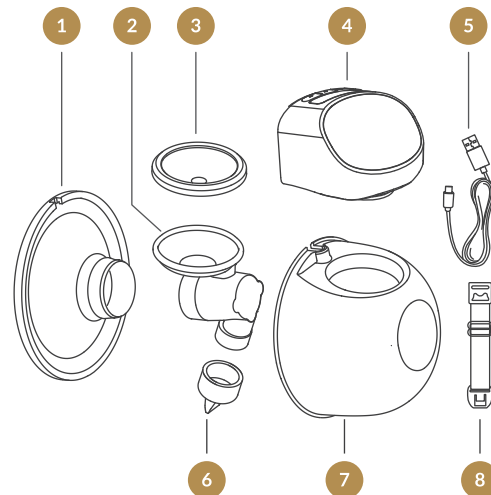


Teilleiste

- | | |
|---------------------|------------------------------------|
| 1 Brusthaube | 5 USB-Ladekabel |
| 2 Befestigungsnappe | 6 Ventil |
| 3 Silikonmembran | 7 Auffangschale |
| 4 Milchpumpenmotor | 8 Verschluss zur Anpassung des BHs |

Beschreibung des LED-Bildschirms und der Tastenfunktionen

02

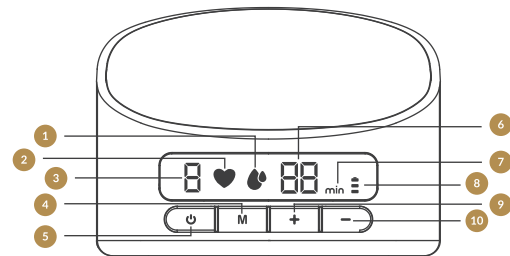

- | | |
|-------------------|-----------------------------------|
| 1 Abpumpmodus | 6 Zeitanzeige |
| 2 Stimationsmodus | 7 Zeit/Minute |
| 3 Standsanzeige | 8 Batteriestatusanzeige |
| 4 Moduswahltaete | 9 Taste zum Erhöhen der Leistung |
| 5 Einschalttaete | 10 Taste zur Leistungsreduzierung |

Inhalt der Verpackung

- Brusthaube • Milchpumpenmotor • Silikonmembran
- USB-Ladekabel • Auffangschale • Ventil
- Befestigungsnappe • Verschluss zur Anpassung des BHs

Zusammenlegen der Milchpumpe

03


Gehen Sie zum Zusammenbau der Milchpumpe wie folgt vor.

! ACHTUNG

- Denken Sie daran, Ihre Milchpumpe wie in dieser Betriebsanleitung empfohlen zu reinigen.
- Vergewissern Sie sich, dass die Milchpumpe richtig zusammengebaut wurde, wie in dieser Anleitung empfohlen.
- Um ein Auslaufen zu verhindern, entfernen Sie die Rückstände an den Rändern, bevor Sie die Milchpumpe falten.
- Waschen Sie sich gründlich die Hände, bevor Sie die gereinigten Teile zusammenbauen.

1. Legen Sie die Silikonmembran in die Befestigungsnappe und drücken Sie sie mit den Händen an, so dass die Ränder fest zusammenpassen, was eine perfekte Abdichtung gewährleistet.

2. Setzen Sie das Ventil unten an der Befestigungsnappe an und achten Sie darauf, dass es in der richtigen Richtung eingebaut wird.

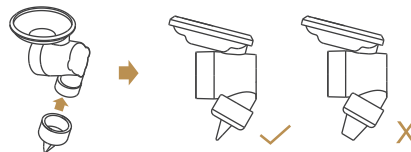


3. Setzen Sie die zusammengesetzte Befestigungsnappe in die Schale ein, wobei das ohrförmige Teil der Noppe in das Innere der Auffangschale passt, und drücken Sie dann mit beiden Händen auf die Scheibe der Befestigungsnappe, um die Ränder fest einzuklemmen und eine vollständige Abdichtung zu gewährleisten.


04



4. Setzen Sie die Brusthaube auf die Auffangschale, richten Sie die Ränder der Brusthaube an den entsprechenden Rändern der Auffangschale aus und drücken Sie sie mit beiden Händen fest.

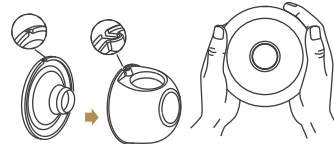

5. Setzen Sie als Nächstes den Milchpumpenmotor in die Auffangschale ein und achten Sie darauf, dass er perfekt sitzt.

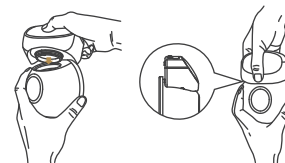


! ACHTUNG

Die Milchpumpe funktioniert nicht, wenn das Gerät über das Ladegerät aufgeladen wird.


Mit dem Abpumpen beginnen

05

1. Drücken Sie die Brusthaube fest an, so dass sie vollständig über der Brustwarze in der Zentralposition befindet. Halten Sie die Brusthaube senkrecht. Achten Sie darauf, die Position des Geräts und der Brust nicht zu verändern, da die Milchpumpe sonst nicht das für den Betrieb notwendige Vakuum erzeugen kann.

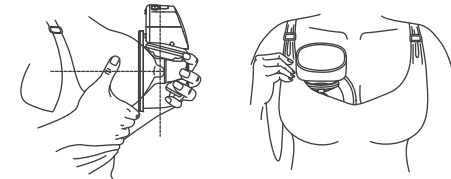


2. Drücken Sie kurz die Einschalttaete, um die Milchpumpe zu starten.

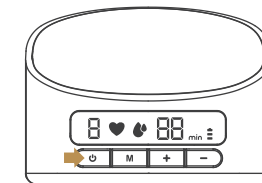


3. Durch kurzes Drücken auf die Taste „M“ geht das Gerät in den Stimationsmodus über. Der Modus hat neun Stufen. Um eine geeignete Saugleistung zu wählen, drücken Sie kurz die Taste „+“, um die Stufe zu erhöhen, und die Taste „-“, um die Stufe zu verringern. In der frühen postnatalen Phase kann es schwierig sein, die Laktation auszulösen, und diese Methode kann verwendet werden, um die Brust zu stimulieren und die Laktation selektiv anzuregen.

06

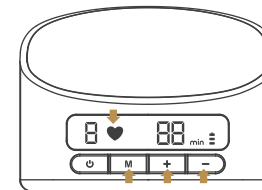


4. Durch kurzes Drücken auf die Taste „M“ geht das Gerät in den Abpumpmodus über. Der Modus hat neun Stufen. Um eine geeignete Saugleistung für sich zu wählen, drücken Sie kurz die Taste „+“, um die Stufe zu erhöhen, und die Taste „-“, um die Stufe zu verringern.

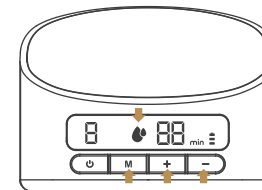

5. Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, drücken Sie kurz auf „“, um die Milchpumpe auszuschalten.

07

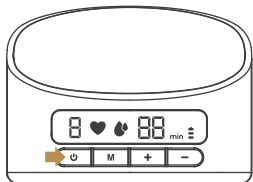


Tipps:

1. Dieses Modell verfügt über eine integrierte Speicherfunktion. Wenn Sie die Milchpumpe wieder einschalten, arbeitet sie automatisch mit dem zuletzt verwendeten Modus und der zuletzt verwendeten Saugleistung. Wenn die Milchpumpe im Automatikmodus ausgeschaltet wurde und wieder eingeschaltet wird, startet die Milchpumpe standardmäßig im ersten Gang im Stimulationsmodus.
2. Die Milchpumpe schaltet sich nach 20 Minuten Betrieb automatisch ab.

Sitzposition während des Stillens

08

Setzen Sie sich entspannt auf einen bequemen Stuhl und lehnen Sie sich leicht nach vorne (stützen Sie Ihren Rücken mit einem Kissen). Halten Sie die Milchpumpe und die Auffangschale in einer aufrechten Position.

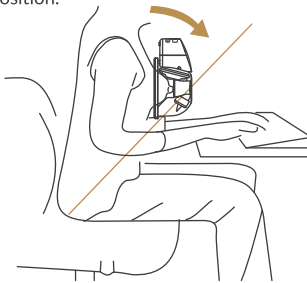

Sitzposition

Reinigung

09

Reinigung und Wartung

	Erste Verwendung	Nach jeder Verwendung
Milchpumpegehäuse	Schalten Sie die Milchpumpe mit der Einschalttaste aus.	Wischen Sie das Gerät bei Bedarf mit einem sauberen, feuchten, mit 70%igem Ethyl- oder Isopropylalkohol getränkten Tuch ab. Tauchen Sie die Milchpumpe nicht in Wasser ein.
Brusthaube, Silikonmembran, Befestigungsnope, Ventil, Auffangschale	Legen Sie das Gerät für 5 Minuten in kochendes Wasser. Legen Sie die Brusthauben, die Silikonmembran, die Befestigungsnope, das Ventil oder die Auffangschale nicht in die Mikrowelle.	Reinigen Sie das Gerät mit einem milden Geschirrspülmittel oder sauberem Wasser.

VORSICHTSMASSNAHMEN

- Seien Sie beim Ausbau und Reinigen des Ventils vorsichtig; wenn das Ventil beschädigt ist, funktioniert die Milchpumpe nicht mehr richtig.
- Um das Ventil zu reinigen, wischen Sie es vorsichtig unter warmem Wasser mit ein paar Tropfen Reinigungsflüssigkeit ab. Stecken Sie keine Gegenstände in das Ventil, die es beschädigen könnten.

Manuelle Reinigung

- Legen Sie die Teile der Milchpumpe in eine saubere Waschschüssel, die nur für Artikel für die Säuglingsernährung verwendet wird. Legen Sie die Teile der Milchpumpe nicht direkt in das Waschbecken.
- Seife und heißes Wasser hinzufügen.
- Reinigen Sie die Teile mit einer sauberen Bürste, die nur für Artikel für die Säuglingsernährung verwendet wird.
- Spülen Sie die Teile unter fließendem Wasser ab oder tauchen Sie sie in einem separaten Gefäß in sauberes Wasser ein.
- Gründlich trocknen. Legen Sie die Teile der Milchpumpe, die Schale und die Flaschenbürste auf ein sauberes, unbenutztes Geschirrtuch oder Papiertuch an einen vor Schmutz und Staub geschützten Ort. Verwenden Sie kein Geschirrtuch zum Abwischen oder Abtrocknen der Gegenstände.
- Reinigen Sie die Schale und die Flaschenbürste. Spülen Sie das Gerät nach jedem Gebrauch gründlich ab und lassen Sie es trocknen. Waschen Sie sie mindestens alle paar Tage mit der Hand.

Bedienungsanleitung für den Verschluss zur Anpassung des BHs 10

10

Passen Sie die Länge der BH-Träger an, um das Abpumpen bequemer zu machen. Ein Ende des Verschlusses zur Anpassung des BHs sollte sich am inneren Verschluss des Still-BHs befinden. Stellen Sie die Länge des Verschlusses zur Anpassung des BHs am anderen Ende des Verschlusses ein, um ihn anzupassen.

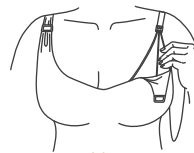


Abb. 1



Abb. 2

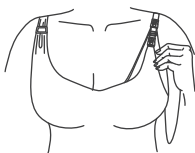


Abb. 3

Batteriestatusanzeige – Abbildung


Batteriestatusanzeige auf dem Display	Verbleibende Betriebszeit der Milchpumpe
Kontrollleuchte der Stufe drei leuchtet	Nicht weniger als 100 Minuten
Kontrollleuchte der Stufe zwei leuchtet	Nicht weniger als 65 Minuten
Kontrollleuchte der Stufe eins leuchtet	Nicht weniger als 25 Minuten
Kontrollleuchte der Stufe eins blinkt	Nicht weniger als 5 Minuten

Beendigung der Verwendung der Milchpumpe


11

Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, nehmen Sie die Milchpumpe von der Brust ab. Halten Sie die Milchpumpe aufrecht, nehmen Sie den Motor ab und halten Sie die Auffangschale, um die Milch in die Flasche zu füllen. Achten Sie darauf, dass die Öffnung zum Auffangen der Milch in der Auffangschale mit der Öffnung der Flasche übereinstimmt, damit die Milch nicht ausläuft.


1. Wenn Sie mit dem Abpumpen fertig sind, drücken Sie lange auf die Einschalttaste, um die Milchpumpe auszuschalten, und öffnen Sie mit dem Finger den Spalt zwischen der Brust und dem Trichter der Milchpumpe, dann nehmen Sie die Milchpumpe vorsichtig von der Brust ab.

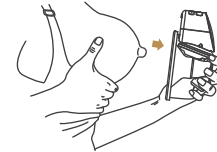

2. Trennen Sie die Auffangschale vom Motor der Milchpumpe; die aufgefangene Milch ist zum Füttern/zur Aufbewahrung bereit. Reinigen Sie die übrigen benutzten Teile gemäß den Anweisungen.

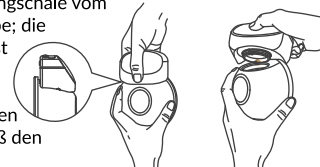

3. Gießen Sie die Milchaufbewahrungsflasche; stellen Sie sicher, dass die Öffnung zur Flasche passt.

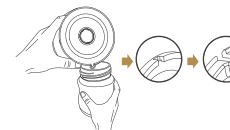

Aufbewahrung von Milch

12

Aufbewahrung von Milch

1. Bewahren Sie nur Milch auf, die mit einer sterilisierten Milchpumpe gewonnen wurde.
2. Die abgepumpte Milch kann in einen sauberen und sterilisierten Milchaufbewahrungsbeutel oder eine verschlossene Milchflasche gefüllt und dann sofort in den Kühlschrank zum Kühlen oder Einfrieren gelegt werden.

Aufbewahrung von Milch bei niedrigen Temperaturen

1. Frieren Sie die Milch nicht wieder ein.
2. Mischen Sie keine frische Milch mit gefrorener Milch.
3. Entsorgen Sie die bei der Fütterung nicht verwendete Milch.
4. Abgepumpte Milch kann 48 Stunden lang im Kühlschrank aufbewahrt oder eingefroren und drei Monate lang im Gefrierschrank aufbewahrt werden; die Flasche oder der Beutel, in dem die Milch aufbewahrt wird, sollte mit einem Etikett versehen sein, auf dem deutlich das Datum und die Uhrzeit, wann abgepumpt worden ist, angegeben sind.

Auftauen der Milch

Die gefrorene Milch über Nacht zum Auftauen in den Kühlschrank stellen. Wenn Sie die Milch dringend auftauen müssen, können Sie eine Schüssel mit heißem Wasser verwenden, um die Milch aufzutauen. Nach dem Auftauen muss die Milch innerhalb von 24 Stunden verwendet werden.

Erwärmung der Milch

1. Stellen Sie die Babyflasche aufrecht in eine Schüssel mit heißem Wasser oder erwärmen Sie die Milch sicher und schnell mit einem Flaschen- und Babykostwärmer.

2. Nicht vergessen! Prüfen Sie die Temperatur der Milch, bevor Sie Ihr Baby füttern.
3. Verwenden Sie zum Erwärmen von Milch keinen Mikrowellenherd, da dadurch wertvolle Nährstoffe und Antikörper zerstört werden können.
4. Außerdem kann es durch ungleichmäßige Erwärmung zu einer teilweisen Überhitzung der Flüssigkeit kommen, was zu Verbrennungen führen kann.
5. Tauchen Sie die Milchaufbewahrungsflasche zum Erwärmen nicht in kochendes Wasser – die Flasche könnte zerbrechen.

innogio

INNOGIO sp. z o.o.
Ostródzka St., 03-289 Warszawa, Polen

www.innogio.com

 @innogio.official  @innogio_com

